

# AVANOS

## A unique design. A new standard in clean.

より安全で確実な気管吸引を実現

TRACH CARE\* Tracheal Closed Suction System

トラックケアー 閉鎖型気管吸引カテーテル






# TRACH CARE\*

Tracheal Closed Suction System

トラックケアー 閉鎖型気管吸引カテーテル

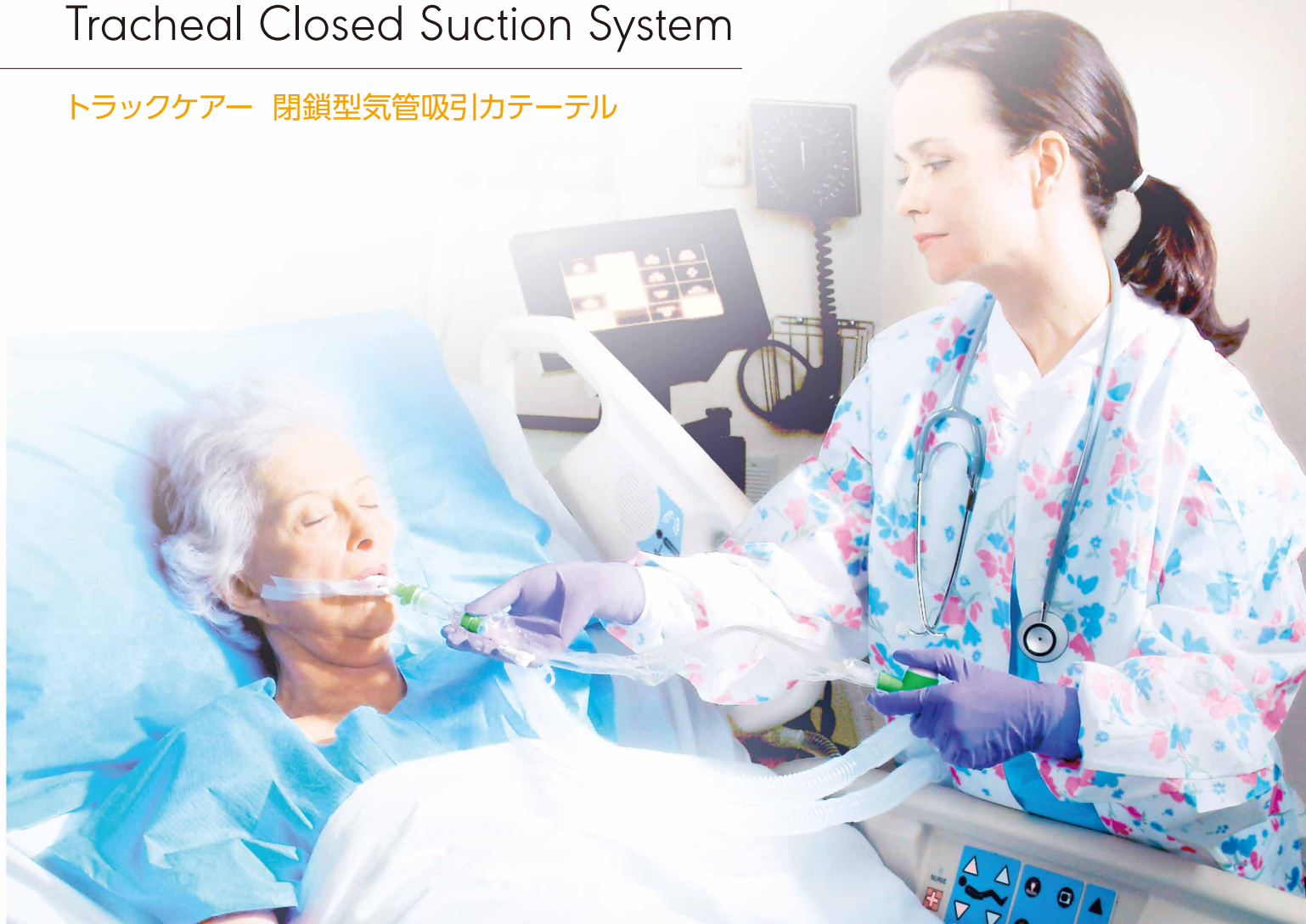

CLEANER IS BETTER,  
SAFETY IS THE BEST.

トラックケアー独自の設計が、  
より安全で確実な気管吸引を実現します。

- 気管吸引の際にも人工呼吸器管理の酸素療法を継続できます。
- 開放式吸引に比べ、酸素化と肺容量の維持を改善します。
- 簡単な操作が、作業の標準化を実現します。




ONLY AVANOS  
HAS DYNAMIC VALVE  
TECHNOLOGY

「フラッパーバルブ」が実現するより安全で確実な吸引

クリーニングチャンバーとフラッパーバルブが、カテーテルの洗浄効果を向上させました。

微生物コロニーの比較(フラッパーバルブありタイプとなしタイプ)

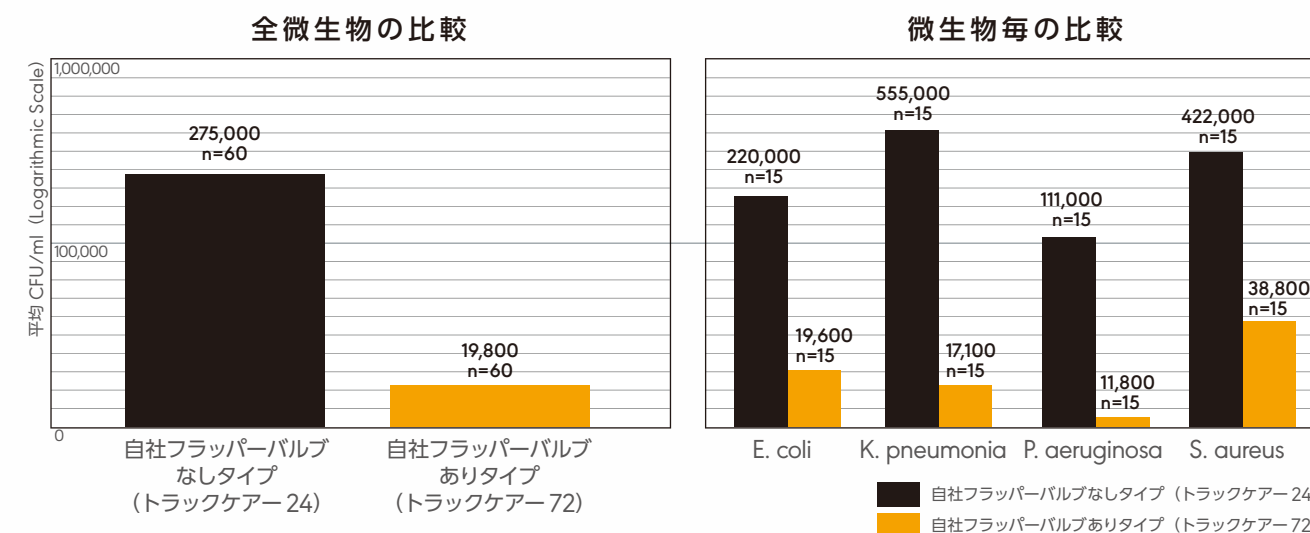

\*\*24 時間使用のトラックケアー：カテーテル先端部分の比較  
BALLARD\*CRITICAL CARE PRODUCTS TRACH CARE\*72 MICROBIOLOGY REPORT より  
Escherichia coli : ATCC #8739 : 大腸菌

Klebsiella pneumonia : ATCC#23357 : クレブシエラ  
Pseudomonas aeruginosa : ATCC#27853 : 緑膿菌  
Staphylococcus aureus : ATCC#6538 : 黄色ブドウ球菌

販売名：KimVent トラックケアー プロダクツ 医療機器認証番号：225ADBZX00161000



[ TRACH CARE 72 ]

成人用トラックケア72

72時間まで使用可能



洗浄液の漏れを予防するフラッパーバルブ

- フラッパーバルブが回路を閉鎖し陰圧をかけることで換気量への影響を改善。



洗浄効果を改善するチャンバー

- フラッパーバルブの空気取り込み孔により、泡になった洗浄液が、チャンバー内のカテーテル先端の洗浄効果を改善。

洗浄ポート

- 一方向弁によりポートを開けたときに生じるエア漏れを防止。

汚れを除去する2つのピープシール

- 2つのピープシールがカテーテル外側の汚れをより効果的に除去。



トラックケア72 ダブルスィーベルエルボー型トラックケア

品 番	品 名	ISOカラーコード
227101-4J	10Fトラックケア72直型ダブルスィーベルエルボー54cm	黒
22716-4J	12Fトラックケア72直型ダブルスィーベルエルボー54cm	白
227-4J	14Fトラックケア72直型ダブルスィーベルエルボー54cm	緑
2271013-4J	10Fトラックケア72気管切開用ダブルスィーベルエルボー30.5cm	黒
2271603-4J	12Fトラックケア72気管切開用ダブルスィーベルエルボー30.5cm	白
22703-4J	14Fトラックケア72気管切開用ダブルスィーベルエルボー30.5cm	緑

※全品フレックスコネクタ付き


トラックケア72 Tピース型トラックケア

品 番	品 名	ISOカラーコード
22715-4J	12Fトラックケア72直型Tピース54cm	白
227135-4J	12Fトラックケア72気管切開用Tピース30.5cm	白
2270135-4J	14Fトラックケア72気管切開用Tピース30.5cm	緑

※全品フレックスチューブ付き

[ MAP CATHETER ]

MAP カテーテル

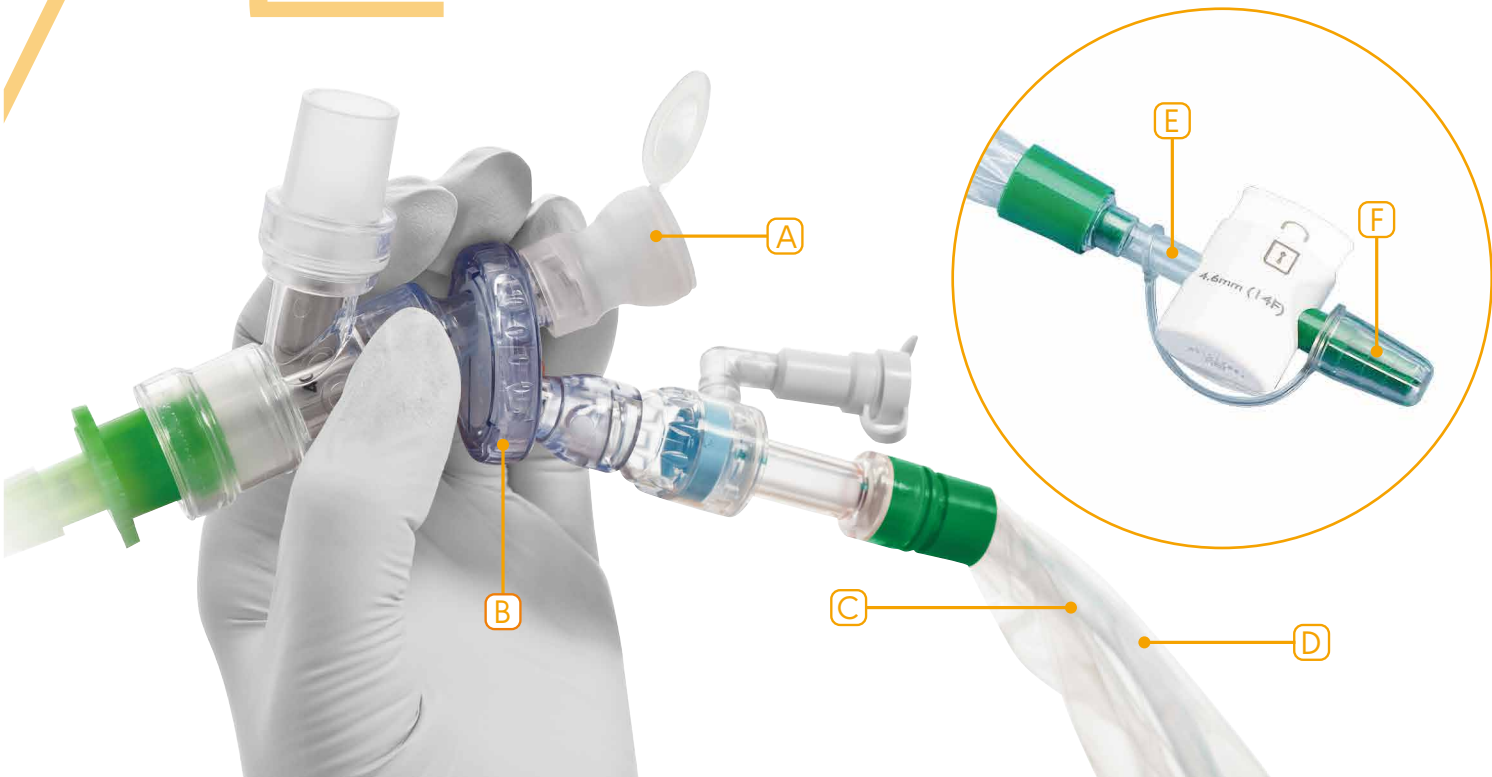

閉鎖回路を維持しながら気管吸引と気管支鏡の操作が行える新しい閉鎖型気管吸引システムです。

FEATURE 特長

A シールカセット  
気管支鏡挿入ポート

B ロータリーマニフォールド  
15日毎交換  
回転させることにより吸引ポジション、  
気管支鏡ポジションを選択可能

C 吸引カテーテル  
3日毎交換

D プルアウトストリング  
カテーテル引き過ぎ予防

E ビューウィンドウ  
喀痰性状確認可能

F テザードキャップ  
吸引チューブの接続が容易



MAPカテーテル

品 番	品 名	ISOカラーコード
240121-5	12F MAPカテーテルアダプターセット気管内挿管用58cm	白
24014-5	14F MAPカテーテルアダプターセット気管内挿管用58cm	緑
240123-5	12F MAPカテーテルアダプターセット気管切開用35cm	白
240143-5	14F MAPカテーテルアダプターセット気管切開用35cm	緑
240125-5	12F MAPカテーテル気管内挿管用58cm	白
240145-5	14F MAPカテーテル気管内挿管用58cm	緑
2401253-5	12F MAPカテーテル気管切開用35cm	白
2401453-5	14F MAPカテーテル気管切開用35cm	緑
24013-5	シールカセット	


※全品フレックスコネクタ付き

# [ TRACH CARE 24 ]

成人用トラックケア-24

24時間まで使用可能

TRACH CARE 24

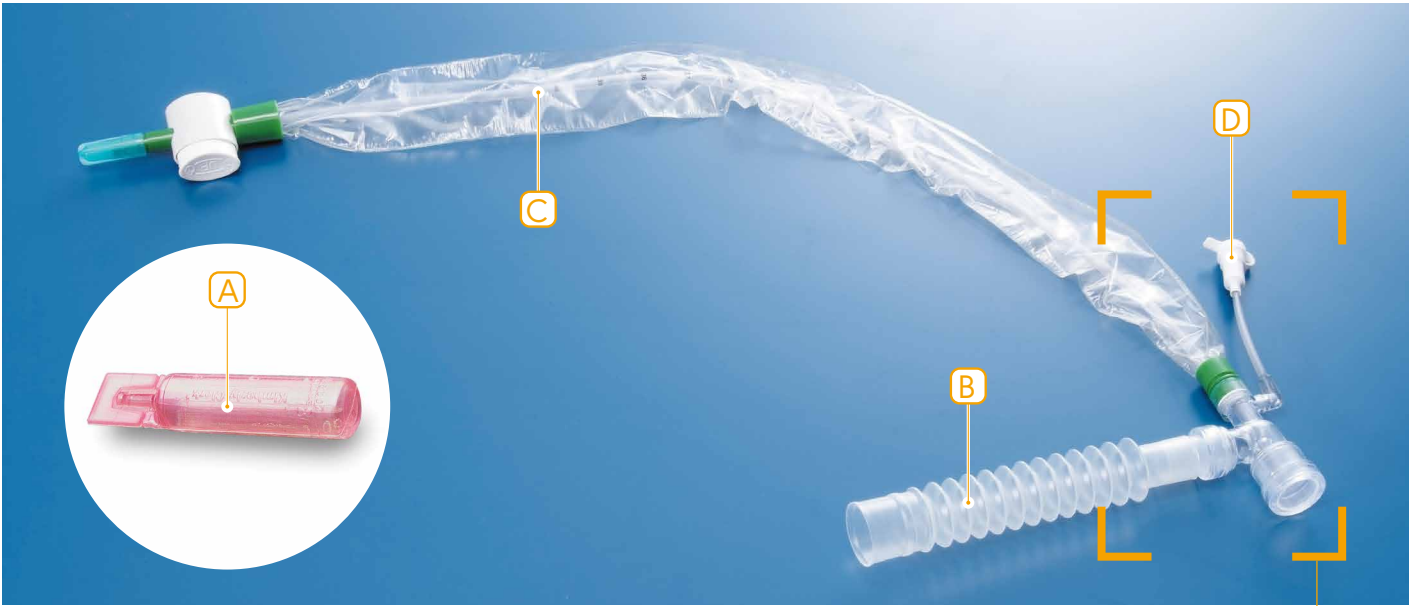

## FEATURE 特長

**A ウェットパック15ml**  
15mlは成人用トラックケアを洗浄する1回分に十分な量です。

**C カテーテル**  
目盛りが2cm毎に表示されているため、挿入深度を正確に計測できます。

**E ダブルスリーベルエルボー**  
双方に回旋機能が付属されているのでケアを行う際に調節可能です。曲型カテーテルは、左右気管支への入れ分けを可能にすることを意図して設計されています。

**B フレックスコネクタ**  
伸縮と角度調整が可能です。

**D 洗浄ポート**  
一方向弁によりポートを開放したときに生じるエア漏れを防止します。

ダブルスリーベルエルボー型  
トラックケア「直型」



ダブルスリーベルエルボー型  
トラックケア「曲型」



### ダブルスリーベルエルボー型トラックケアー

品 番		品 名	ISOカラーコード
ウェットパック無	ウェットパック付		
2160-4J	21606-4J	12Fトラックケアー直型ダブルスリーベルエルボー54cm	白
2210-4J	22106-4J	14Fトラックケアー直型ダブルスリーベルエルボー54cm	緑
21609-4J	216069-4J	12Fトラックケアー曲型ダブルスリーベルエルボー56cm	白
22109-4J	—	14Fトラックケアー曲型ダブルスリーベルエルボー56cm	緑
21603-4J	216036-4J	12Fトラックケアー気管切開用ダブルスリーベルエルボー30.5cm	白
22103-4J	221036-4J	14Fトラックケアー気管切開用ダブルスリーベルエルボー30.5cm	緑

※ウェットパック付きは、トラックケアー1本につきウェットパック15mlが12本セットで入っています。 ※全品フレックスコネクタ付

### Tピース型トラックケアー

品 番	品 名	ISOカラーコード
2155-4J	12Fトラックケアー直型Tピース54cm	白
2205-4J	14Fトラックケアー直型Tピース54cm	緑
21559-4J	12Fトラックケアー曲型Tピース56cm	白
2151311J	12Fトラックケアー気管切開用Tピース30.5cm	白
220135-4J	14Fトラックケアー気管切開用Tピース30.5cm	緑

※全品フレックスチューブ付き

### トラックケアー アクセサリー

品 番	品 名
118	ウェットパック 15ml
8317	ウェットパック 5ml
19000	7.5mmプラグ
1115	フレックスコネクタ

# [ TRACH CARE 24 ]

新生児・小児用トラックケア-24

24時間まで使用可能

TRACH CARE 24



## FEATURE 特長

**A カテーテル**  
目盛りが1cm毎に、そして、カラーマークが表示されているため挿入深度を正確に計測できます。

**B ウェットパック5ml**  
5mlは、小児用トラックケアを洗浄する1回分に十分な量です。

### Y型

品 番		品 名	ISOカラーコード
ウェットパック無	ウェットパック付		
195-4J	8293J	5Fトラックケアー新生児用Y型30.5cm	灰色
196-4J	8295J	6Fトラックケアー新生児用Y型30.5cm	薄緑色
197-4J	—	7Fトラックケアー新生児用Y型30.5cm	クリーム色
198-4J	8294J	8Fトラックケアー新生児用Y型30.5cm	薄青色

※ウェットパック付は、トラックケアー1本につきウェットパック5mlが12本セットで入っています。

販売名：kimVent トラックケアープロダクツ 医療機器認証番号：225ADBZX00161000

### エルボー型

品 番	品 名	ISOカラーコード
206-4J	6Fトラックケアー新生児・小児用エルボー30.5cm	薄緑色
207-4J	7Fトラックケアー新生児・小児用エルボー35.5cm	クリーム色
208-4J	8Fトラックケアー新生児・小児用エルボー35.5cm	薄青色
210-4J	10Fトラックケアー新生児・小児用エルボー40.5cm	黒色

## Multi Access Port

# [ TRACH CARE MAC ]

薬物注入用カテーテル トラックケアーMAC



## FEATURE 特長

- 換気を行いながら、サーファクタントなどの薬液注入ができます。
- より安全で、より確実なサーファクタント療法を目指しました。
- トラックケアー新生児用Y型との併用も可能です。

品 番	品 名
1900J	5FトラックケアーMAC 2.5mm 3.0mm 3.5mm

## COMPONENTS 構成品

- トラックケアーMAC本体
- Yアダプタ (2.5mm、3.0mm、3.5mm各1)
- 7.5mmプラグ / キャップ

製造販売元：

**アバノス・メディカル・ジャパン・インク**

〒220-8115 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワー

Tel. (045) 682-5150

Fax. (045) 682-5154

製品に関するお問い合わせ： **FreeCall** 0800-100-5100

**AVANOS**

[www.avanos.jp](http://www.avanos.jp)

\*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©2019 AVNS. All rights reserved.